

#### Jótállás:

A GYSGY REHA Kft. a 151/2003. (IX.22.) , illetve a 270/2020. (VI.12.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett az alábbiak szerint biztosít jótállást a jelen terméknek:

10.000 – 100.000 Ft közötti eladási ár esetén **1 év**

100.000 – 250.000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**

250.000 Ft feletti eladási ár esetén **3 év** kötelező jótállást biztosítunk.

A jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni, a vásárlást igazoló blokkal, vagy a Használati Utasítással.

#### Nyilatkozat

Gyártó neve, kereskedelmi neve, védjegye: GYSGY REHA Kft.

Gyártó egyedi regisztrációs száma (SRN): HU-MF-000008019

Gyártó székhelye: 1149 Budapest, Pillangó utca 12.

Nyilatkozom, hogy jelen gyártói megfelelőségi nyilatkozatot cégem, mint gyártó, kizárólagos felelőssége mellett adták ki, továbbá nyilatkozom, hogy az általam gyártott termék(ek)

#### AJ-10 Rehabmed bokagumi

Bejelentett szervezet neve/azonosító száma, megfelelőségi eljárás típusa és tanúsítvány száma (ha szükséges):

**ISO 13485**

**SGS HU19/8302**

Egységes előírások (CS), amelyeket a termék megfelelőségének megállapításához felhasználtak (ha szükséges):

#### m e g f e l e l ( n e k )

az orvostechnikai eszközökről szóló 745/2017 EU rendelet rá vonatkozó követelményeinek. Minden ezt igazoló dokumentáció a gyártónál elérhető.

Regisztrációs kötelezettségemnek az eszköz tekintetében, és mint gazdasági szereplő eleget tettem. Amennyiben az eszköz használata közben, azzal kapcsolatban az MDR 87. cikk szerinti súlyos váratlan esemény előfordul (mely az egészségi állapot súlyos romlását, halált okozott vagy okozhatta volna), szükséges jelezni a gyártó felé személyesen vagy telefonon a fenti elérhetőségeken, továbbá az illetékes hatóságnak:

OGYÉI Főosztály e-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu.

Váratlan esemény bejelentése a gyártónál:

telefonszám: +36 1 330 7770 /131 m. (munkanapokon 8:00-15:00)

e-mail cím: bejelentes@gysgy.hu

Nyilatkozat: A gyártó vállalja, hogy a Megfelelőségi Nyilatkozatban szereplő információkat az eszköz forgalomba hozatalát követően legalább tíz évig meg kell őrizni.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG  
MEG KELL ŐRIZNI!



**GYSGY REHA Kft.**

Magyarország, Budapest, 1149 Pillangó utca 12.

Tel: +36 1 330-7735; +36 1 288-6640 Fax: +36 1 700-2149

www.gysgy.hu, E-mail: info@gysgy.hu

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### AJ – 10 REHABMED BOKAGUMI

☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL



## Az eszköz rendeltetése

A láb és a boka ízületeinek tehermentesítésére szolgál.

A bokagumi használata 14 éves kortól ajánlott, egészséges Személyeknek megelőzés céljából és beteg személyeknek a javallatokban leírt esetekre. A bokarögzítő gumi használatával rögzítjük a laza, lötyögő, ízületeket, ezzel óvja az elmozdulástól, így elősegítve a gyorsabb rehabilitációt.

Használható nyitott és zárt lábbelivel vagy mezítláb is.

### Javallatok:

- láb, boka vagy lábtő ízületi gyulladás esetén
- ízületi merevség, bokaficam utáni rögzítésre
- törések, utáni tehermentesítésre és a fájdalom csillapítására
- a sérült láb vagy boka rögzítésére
- használható sportoláshoz ficamok megelőzésére

### Ellenjavallatok:

- vérző, sebes, gennyes, égett bőrfelület esetén
- nyílt törések kezelésére
- allergiás reakció az anyaggal szemben

### Mellékhatások:

Cégünk törekszik arra, hogy termékeink minél kedvezőbben befolyásolják egészségének alakulását, azonban mellékhatások előfordulhatnak.

*Nagyon ritka:* az anyaggal szembeni bőr allergiás reakciók, viszketés.

### Felvétel, használat

Az AJ-10 bokarögzítő gumit egyszerűen, a hagyományos zoknikhoz hasonlóan tudjuk a lábra felhúzni. A bokarögzítő világosabb része illeszkedjen a sarokhoz. Igazítsa el a lábán, simítsa ki a gyűrődéseket!

Cipővel történő viselése esetén használhat cipőkanalat a könnyebb felvételhez.

Éjszaka viselni nem kötelező. Meleg évszakokban javasolt többször levenni és tisztítani.

### Anyag


Rugalmas légáteresztő gumivászon

Felülvizsgálat dátuma: 2022. 12. 05.; v3

## Tisztítás, ápolás

A bokarögzítő gumit semleges pH értékű, 100%-ban illat-és színezékmentes szappan/mosószer használatával, kézmeleg vagy max. 40°C hőmérsékletű vízzel mossa. Szárítás ruhaszárító kötelen történik.

### Tilos mosógéppel mosni, centrifugálni, vasalni!

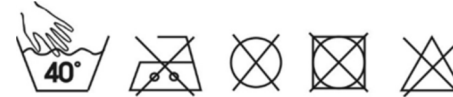

Tisztítsa meg az eszközt naponta használat után és az első használat előtt. Textilöblítők, fehérítők és más termékek vagy tisztítószerek károsíthatják az eszközt, ezért nem ajánlott a használatuk.

### A termék újrahasználatossága

Használat után, ha a termék elérte a kívánt hatást, nem javasoljuk újra felhasználásra higiéniai és anyag elváltozási okok miatt.

### Figyelmeztetések

A bokarögzítő gumi huzamosabb ideig történő használat, viselet során a mechanikus, hőmérsékleti és egyéb behatások miatt elhasználódhat.

Kérjük, azonnal hagyja abba a használatot, ha az alábbiakat tapasztalja:

- az anyag szakadása, sérülése
- az anyag túlzott megnyúlása
- a bokarögzítő gumi méretének megváltozása
- bőrirritáció, bőrpír, viszketés jelentkezése esetén