

Jótállás:

A GYSGY REHA Kft. a 151/2003.(IX.22) , illetve a 270/2020. (VI.12.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett az alábbiak szerint biztosít jótállást a jelen terméknek:

10.000 – 100.000 Ft közötti eladási ár esetén **1 év**

100.000 – 250.000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**

250.000 Ft feletti eladási ár esetén **3 év** kötelező jótállást biztosítunk.

A jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni, a vásárlást igazoló blokkal, vagy a Használati Utasítással.

Nyilatkozat

Gyártó neve, kereskedelmi neve, védjegye: GYSGY REHA Kft.

Gyártó egyedi regisztrációs száma (SRN): HU-MF-000008019

Gyártó székhelye: 1149 Budapest, Pillangó utca 12.

Nyilatkozom, hogy jelen gyártói megfelelőségi nyilatkozatot cégem, mint gyártó, kizárólagos felelőssége mellett adták ki, továbbá nyilatkozom, hogy az általam gyártott termék(ek)

AJ – 4 REHABMED TÉRDRÖGZÍTŐ GUMI

Bejelentett szervezet neve/azonosító száma, megfelelőségi eljárás típusa és tanúsítvány száma (ha szükséges):

ISO 13485

SGS HU19/8302

Egységes előírások (CS), amelyeket a termék megfelelőségének megállapításához felhasználtak (ha szükséges):

m e g f e l e l (n e k)

az orvostechikai eszközökről szóló 745/2017 EU rendelet rá vonatkozó követelményeinek. Minden ezt igazoló dokumentáció a gyártónál elérhető.

Regisztrációs kötelezettségemnek az eszköz tekintetében, és mint gazdasági szereplő eleget tettem. Amennyiben az eszköz használata közben, azzal kapcsolatban az MDR 87. cikk szerinti súlyos váratlan esemény előfordul (mely az egészségi állapot súlyos romlását, halált okozott vagy okozhatta volna), szükséges jelezni a gyártó felé személyesen vagy telefonon a fenti elérhetőségeken, továbbá az illetékes hatóságnak:

OGYÉI Főosztály e-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu.

Váratlan esemény bejelentése a gyártónál:

telefonszám: +36 1 330 7770 /131 m. (munkanapokon 8:00-15:00)

e-mail cím: bejelentes@gysgy.hu

Nyilatkozat: A gyártó vállalja, hogy a Megfelelőségi Nyilatkozatban szereplő információkat az eszköz forgalomba hozatalát követően legalább tíz évig meg kell őrizni.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG
MEG KELL ŐRIZNI!



GYSGY REHA Kft.

Magyarország, Budapest, 1149 Pillangó utca 12.

Tel: +36 1 330-7735; +36 1 288-6640 Fax: +36 1 700-2149

www.gysgy.hu, E-mail: info@gysgy.hu

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AJ – 4 REHABMED TÉRDRÖGZÍTŐ GUMI



Az eszköz rendeltetése

A térd és a térd ízületeinek tehermentesítésére, valamint rögzítésére szolgál. A termék 14 éves kortól ajánlott, egészséges személyeknek megelőzés céljából és beteg személyeknek a javallatokban leírt esetekre. A térdrögzítő gumi rögzíti a laza, lötyögő, ízületet, ezzel óvja az elmozdulástól, az újabb sérülések kialakulásától, sérülés esetén rögzíti a térdkalácsot és megakadályozza a nem kívánt mozgásokat.

Javallatok:

- térd, térdkalács enyhébb sérülése esetén
- térdízületi gyulladás esetén
- enyhébb térdficam utáni rögzítésre
- törések utáni rögzítésre
- használható sportoláshoz a térd védelmének megerősítése céljából

Ellenjavallatok:

- vérző, sebes, gennyes, égett bőrfelület esetén
- nyílt törések kezelésére
- súlyos térd-sérülések vagy térdműtétek után
- allergiás reakció az anyaggal szemben

Mellékhatások:

Cégünk törekszik arra, hogy termékeink minél kedvezőbben befolyásolják egészségének alakulását, azonban mellékhatások előfordulhatnak.

Nagyon ritka: az anyaggal szembeni bőr allergiás reakciók, viszketés.

Felvétel, használat

Az AJ-4 tédrögzítő gumit a sérült vagy fájós lábra húzzuk fel a nadrág felvételéhez hasonlóan. A tédrögzítő gumi elastikus anyagán található GYSGY feliratot igazítsa előre, míg a két oldalon futó függőleges varrások kerüljenek a térd külső és belső oldalához. Simítsa ki a gyűrődéseket és igazítsa el a térdet. A tédrögzítő gumit mindig nadrág alatt, a bőrrel érintkezve hordja.

Éjszaka viselni nem kötelező. Meleg évszakokban javasolt többször levenni és tisztítani.

Felülvizsgálat dátuma: 2022. 12. 02.; v3


Anyag

Rugalmas textilívia.

Tisztítás, ápolás

A tédrögzítő gumit semleges pH értékű, 100%-ban illat-és színezékmentes szappan/mosószer használatával, kézmeleg vagy max. 40°C hőmérsékletű vízzel mossa. Szárítás ruhaszárító kötélén történik.

Tilos mosógéppel mosni, centrifugálni, vasalni és szárítógépben szárítani!

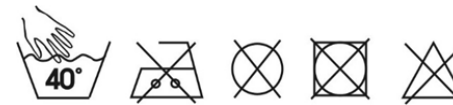

Tisztítsa meg az eszközt naponta használat után és az első használat előtt. Textilölblítők, fehérítők és más termékek vagy tisztítószeresek károsíthatják az eszközt, ezért nem ajánlott a használatuk.

A termék újrahasználatossága

Használat után, ha a termék elérte a kívánt hatást, nem javasoljuk újra felhasználásra higiéniai és anyag elváltozási okok miatt.

Figyelmeztetések

A tédrögzítő gumi huzamosabb ideig történő használat, viselet során a mechanikus, hőmérsékleti és egyéb behatások miatt elhasználódhat. Kérjük, azonnal hagyja abba a használatot, ha az alábbiakat tapasztalja:

- az anyag szakadása, sérülése
- az anyag túlzott megnyúlása
- a tédrögzítő gumi méretének megváltozása
- bőrirritáció, bőrpír, viszketés jelentkezése esetén