


## Rehabmed® termékek

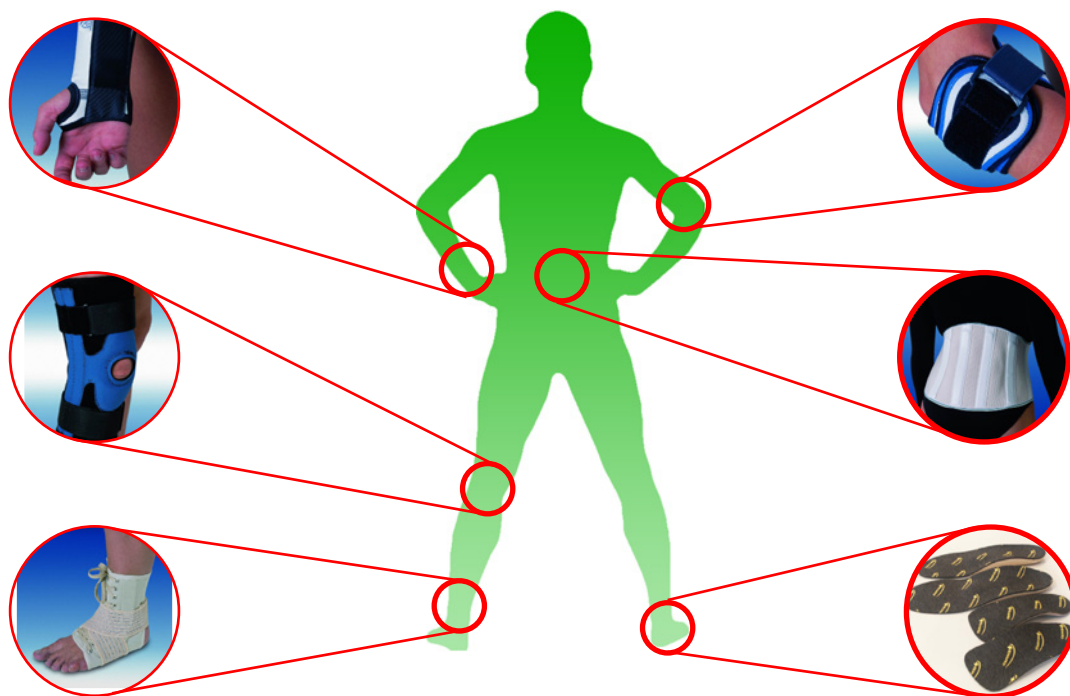

Talpbetétek - sarokemelők, boka-, térd-, comb-, csípő ortézisek  
Medenceszorító övek, gerinckezelők, tartásjavítók  
Felső végtag ortézisek, nyakrögzítők  
Hasi és lágyéksérv eszközök

2022.10.01.-től

# Bemutatkozás

A GYSGY ORTOPÉDTECHNIKA Kft az „elődcég” vezető műszerészeiből alakult **1992-ben**.

A névváltoztatást követően a GYSGY REHA Kft. már több, mint 10 éve a magyarországi egyedi gyógyászati segédeszközök gyártásának egyik fő referencia helye, az új magyar gyártású ortézisek és protézisek kifejlesztője, egyik fontosabb szakmai bázisa. Jelenleg 68 főt alkalmazunk.

A társaság alaptevékenysége az orvostechnikai-, gyógyászati segédeszközök gyártása és forgalmazása. Az elmúlt 5 év során több, mint 80 új terméket fejlesztettünk ki, melyek a korszerű segédeszköz piacon megállják a helyüket. A Magyarországon gyártott és forgalmazott klasszikus gyógyászati segédeszközöknek teljes palettájával rendelkezünk. Fejlődésünk következtében ma a hazai ortopédiai eszköz piac jelentős alapanyag és alkatrész beszállítója lettünk, kiterjedt import és export kapcsolatokkal. Tevékenységünk során mindig élenjárók voltunk az új technológiák, új alapanyagok felhasználásában, új eszközök kifejlesztésében és azok hazai piacokon való bemutatásában.

**2008-ban** a Társaság korszerű, az Európai Unió elvárásainak megfelelő székhelyet alakított ki Budapest XIV. kerületében.

Az új telephely színvonalas helyet biztosít szakrendeléseknek, próbatermeknek, különböző egyéb vállalkozások által nyújtott szolgáltatásoknak, mint pl. gyógyszertár, hallókészülékek, érszűkület kezelés.

A gyártás is itt folyik, a korszerű műhelyek felszereltsége megfelelő környezetet és munkakörülményeket biztosítanak dolgozóinknak.

Elsőként a GYSGY REHA KFT. alkalmazza a gyógyászati segédeszköz ellátásban a bőrbarát, szilikon technológiát.

Stratégiánk, hogy hatékony és eredményes módszerekkel olyan eszközöket és szolgáltatásokat fejlesszünk, gyártásunk, forgalmazzunk, amelyek ügyfeleink, a gyógyászati segédeszköz használóknak biztosítsák az esélyegyenlőség megvalósulását. Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal segítjük őket a minél emberibb élet elérésében és a munkába való visszatérésben.


A GYSGY REHA Kft. a magyar gyógyászati segédeszköz piac egyik meghatározó szereplője. Tevékenységünket a 2001-es évtől ISO 9001/2008 szerinti minőségbiztosítási rendszerben végezzük (sikeres évenkénti TÜV Rheinland auditokkal), alapvetően két fő kategóriában: termelés és kereskedelem. A termelő tevékenységünk 2 fő termékcsoporthoz ölel fel:

1. Egyedi méretre gyártott művégtagok, ortopédiai készülékek, haskötők, talpbetétek, stb.
2. Adaptív és méretsorozatos eszközök, alkatrészek gyártása. Ezeket részben saját kiszolgálás során forgalmazzuk, de nagyrészt továbbértékesítésre gyártjuk.

Tekintse át új termékkatalógusunkat, az aktuális árakról szíveskedjen érdeklődni.

Termékeinket megrendelheti webshopunkban ([www.gysgy.hu](http://www.gysgy.hu)), illetve viszonteladók rendelkezésére is állunk.

A katalógusban szereplő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

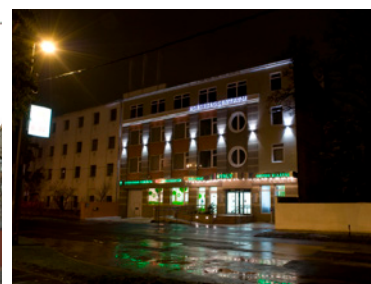

# Tartalomjegyzék

Bemutató	2. oldal
Sanitized ezüst-ion talpbetét technológia	4 - 5. oldal
Alsó végtag ortézisek	6 - 13. oldal
Ágyék - keresztcsonti ortézisek	14. oldal
Felső végtag és nyaki ortézisek	15 - 19. oldal
Hasfali és lágyéksérv kezelő eszközök	20. oldal
Elérhetőségek	21. oldal

Újdonság!

Sanitized® ezüst-ion talpbetét



### Mi a Sanitized?

A Svájci székhelyű Sanitized AG több mint 50 éve foglalkozik az ezüst nem nanotechnológiás felhasználásával textíliákban, ruházati termékekben, ágyneműkben és számos más iparágban.

Mára a Sanitized egyfajta minőségi mutatóvá emelkedett fel, amely három szempont alapján biztosítja a vásárlót, hogy az adott - Sanitized ezüst technológiával készült - termék minőségi, higiénikus és a környezetre veszélytelen.

### Az ezüst antibakteriális hatásai

Az ezüstről ősidők óta tudjuk, hogy antibakteriális hatású, azonban jelentősége a modern korban a rezisztencia terjedése miatt megnőhet. Az ezüstnek ma már ismert egy csodálatos tulajdonsága: az emberi bőrrel érintkezve képes a bőr felületén élő gombákat, baktériumokat elpusztítani, anélkül, hogy toxikus hatással lenne ránk.


Az ezüstözött szál visszaveri a hőt, jó elektromos- és hővezető, ezáltal meggátolja a sztatikus feltöltődést, melegen tartja a lábat, ideálisabb környezetet biztosít az ízületeinknek és növeli a komfortérzetet. Aki sokat van zárt cipőben, annak lábán könnyen elszaporodhatnak a kórokozók, az ezüst képes ezt meggátolni.

Tudományos kísérletek bizonyítják, hogy az ezüst elpusztítja a baktériumokat. Ezért is használják víztisztításra, nehéziparban, könnyűiparban, egészségügyben egyaránt. Természetes és nincs mellékhatása az emberi szervezetre.






## A Sanitized működése


HOGYAN MUKODIK A SANITIZED® EZÜST?

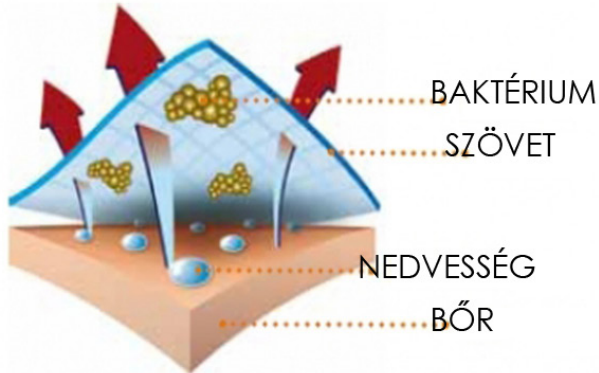


A SANITIZED® EZÜST HATÁSA A BAKTÉRIUMRA

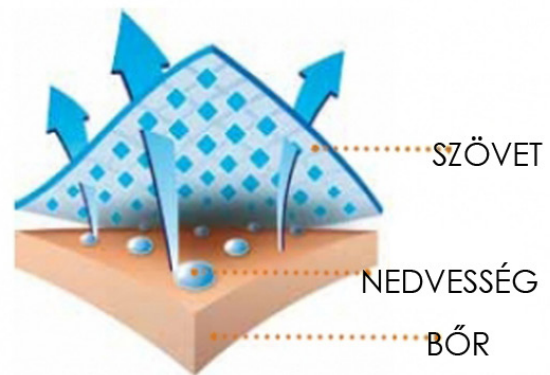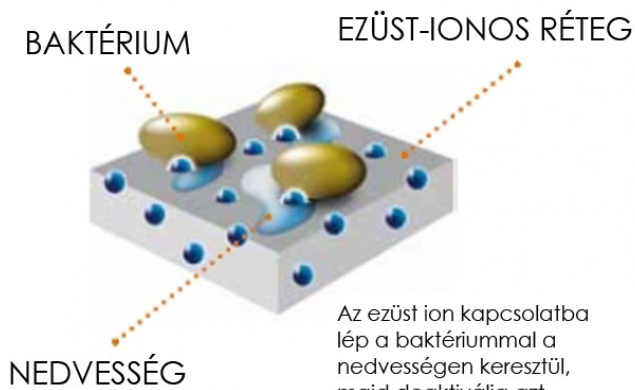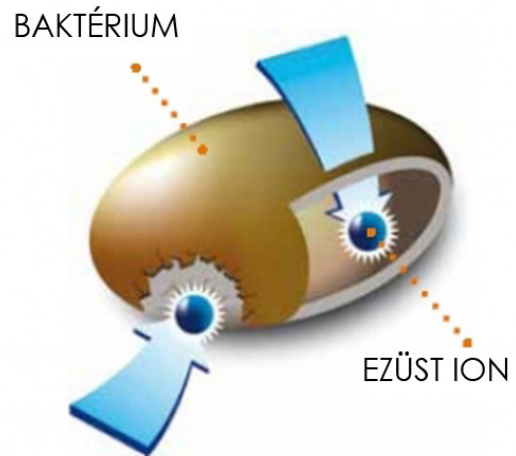

Nincs szag

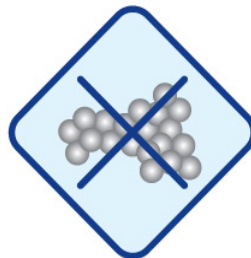

Nincs baktérium

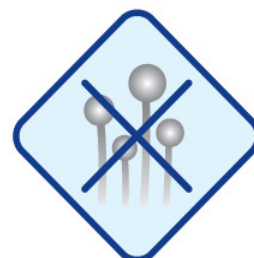

Nincs gombásodás

## Alsó végtag ortézisek

<b>Megnevezés</b>	<b>Sanitized talpbetét 4/4 teljes</b>
<b>Méreték</b>	17 - 48-ig
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	szürke
<b>Me.egység</b>	pár
<b>Indikáció</b>	Pes planus, pes calcaneovalgus esetén

**Rövid leírás** A standard szendvics szerkezetű talpbetét Sanitized réteggel borított változata, mely kiválóan alkalmas a boltozatsüllyedés/lúdtalp kezelésére, mindemellett nagyobb higiénit is biztosít lábunknak.



<b>Megnevezés</b>	<b>Thermoplasztikus talpbetét</b>
<b>Méreték</b>	egyedi méretre
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	szürke
<b>Me.egység</b>	pár
<b>Indikáció</b>	- Pes planus - Pes calcaneovalgus

**Rövid leírás** Laticel emeléssel és sertsébbőr borítással készül egyedi méretvétel alapján hétköznapi használatra.



<b>Megnevezés</b>	<b>Saroklyukas Starflex talpbetét</b>
<b>Méreték</b>	egyedi méretre
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	átlátszó
<b>Me.egység</b>	pár
<b>Indikáció</b>	- Pes planus - Pes calcaneovalgus - sarokcsont kinövés esetén

**Rövid leírás** Sarokcsont kinövés esetére készített speciális talpbetét, saroklyukasztással. Laticel borítás az érzékeny és fájós sarok védelmére.



## Talpbetétek

<b>Megnevezés</b>	<b>Műanyag betét Sanitized borítással, rövidített 3/4</b>
<b>Méret</b>	36 - 38 - 40 - 42 - 44-es méreteken
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	szürke
<b>Me.egység</b>	pár
<b>Indikáció</b>	- pes calcaneovalgus - pes calcaneovarus esetén
<b>Rövid leírás</b>	Rövidített műanyag talpbetét Sanitized borítással, műanyag szerkezettel, mely jobban terhelhető.



<b>Megnevezés</b>	<b>P-182 3/4-es Sport talpbetét ; P-183 Sport talpbetét harántemeléssel</b>
<b>Méret</b>	35 - 45-ig - mindkét típus
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	barna/drapp
<b>Me.egység</b>	pár
<b>Indikáció</b>	- pes planus - pes calcaneovalgus



**P-182**

<b>Rövid leírás</b>	A P-182 Sport talpbetét 3/4-es kivitelű hosszanti és harántboltozat emeléssel sarokrészen könnyítéssel. A talpész 3/4-ig kényelmes szivacs borítással fedett.
	A P-183 1/1-es Sport teljes méretű talpbetét a cipőben végig érő, hosszanti és harántboltozat emeléssel készül. A sarokrészen könnyítés-sel, végig kényelmes szivacs borítással fedett.



**P-183**

<b>Megnevezés</b>	<b>Műanyag gyermek sajkabetét</b>
<b>Méret</b>	csak gyermekeknek, egyedi méretre
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	többféle választható fóliázás
<b>Me.egység</b>	pár
<b>Indikáció</b>	- pes planus - pes calcaneovalgus
<b>Rövid leírás</b>	Csecsemők és gyermekek részére készített egyedi talpbetét natúr színben vagy választható fóliával. Harántemelés nélkül készül, a láb harántpárnájáig ér. Sportoláshoz, tornacipőben, edzőcipőben való viselésre is alkalmas.



## Alsó végtag ortézisek

### Talpbetétek

**Megnevezés** B-351 Talpbetét színbőr borítással / Perf. EVA borítással (teljes/rövid)

**Méret** 35 - 45 színbőr / 19 - 48-ig EVA borítással

**Oldal** -

**Szín** szürke/barna

**Me.egység** pár

**Indikáció** pes calcaneovalgus, pes calcaneovarus esetén



**Rövid leírás** Mindkét talpbetét teljes (4/4) és rövidített (3/4) méretben is készül. Szerkezetük ugyanaz, a fedőanyag bőr vagy habosított műanyag (EVA)



**Megnevezés** Starflex thermoplasztikus betét

**Méret** 34 - 46-ig

**Oldal** -

**Szín** átlátszó

**Me.egység** pár

**Indikáció** pes calcaneovalgus, pes planus esetén


**Rövid leírás** Starflex alacsony hőmérsékleten lágyuló talpbetét. Különlegessége, hogy meleg vízben könnyen formázható, alaktartó, bármilyen fedőréteggel bevonható, és teljesen a talp formájához illeszthető.





## Bokarögzítők - bokagumik

<b>Megnevezés</b>	<b>AJ - 10 ventilációs rugalmas bokarögzítő</b>
<b>Méret</b>	S 16-21 cm ; M 21-26 cm ; L 26-31 cm ; XL 31-37 cm
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	kék
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- ficam - sportsérülés - bokaízületi instabilitás
<b>Rövid leírás</b>	Rugalmas légáteresztő gumivászonból készül. A láb- és boka ízületeinek, lábtőizületi gyulladások esetén, amikor a megbetegedett ízületek elmeredése várható, törések után terhelési fájdalmak esetén az ízületek tehermentesítésére szolgál.

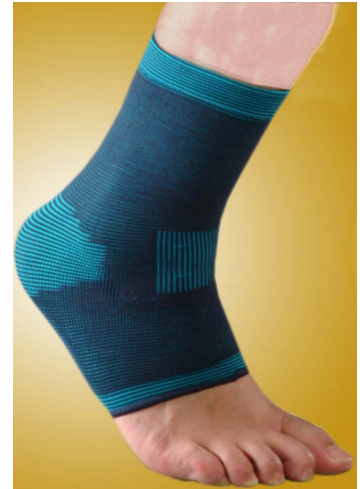

<b>Megnevezés</b>	<b>Peroneus emelő</b>
<b>Méret</b>	S - M - L - XL
<b>Oldal</b>	bal - jobb
<b>Szín</b>	fehér - átlátszó
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- peroneus bénulás a lábszár szintjében
<b>Rövid leírás</b>	A peroneus emelő a plantárflexio megakadályozását szolgálja. A vékony műanyag lemezből mélyhúzott ortézis utólag gipszmintára vagy közvetlenül a lábra előnyösen alakítható. Higiénikus, könnyen tisztítható, csekély súlyú és cipőben viselhető.



<b>Megnevezés</b>	<b>AJ - 21 fűzős bokarögzítő</b>
<b>Méret</b>	S 15-20 cm ; M 20-25 cm ; L 25-30 cm ; XL 30-35 cm
<b>Oldal</b>	bal - jobb
<b>Szín</b>	fehér
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- instabil bokaízület ill. laza bokaszalagok - chronicus bokaízületi instabilitás - chronicus bokaízületi gyulladás - szalagsérülés konzervatív kezelésére
<b>Rövid leírás</b>	Erős vászonból készülő bokarögzítő, belül nedvszívó frottír anyaggal párnázva, fűzős rögzíthetőséggel. Sportsérülések kezelésére, műtétek utáni rehabilitációra, bokaficam, bokasérülés kezelő eszköze. Stabilizálja és tehermentesíti a bokaízületet, ezzel a gyógyulását elősegíti. Cipőben is viselhető.



<b>Megnevezés</b>	<b>AJ - 221 légpárnás bokarögzítő</b>
<b>Méret</b>	egy méret
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	fekete-fehér
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- krónikus bokaizületi elégtelenség</li> <li>- nagyfokú bokaizületi instabilitás</li> <li>- bokaizületi arthrosis, arthritis</li> <li>- bokatörések kezelése, illetve utókezelése, lábközépcsont basis törések kezelése</li> </ul>
<b>Rövid leírás</b>	<p>A fűzős bokarögzítő rögzítő műanyag, tépőzáras változata, belső oldalán felfújható légsákkal vagy opcionálisan hűtőbetéttel. Sportsérülések, nagyfokú bokaizület instabilitás, bokaficam, törés és műtét után kiváló kezelő eszköz. Cipővel is viselhető.</p>



<b>Megnevezés</b>	<b>AJ - 270 ROM Walker</b>
<b>Méret</b>	S - M - L - XL
<b>Oldal</b>	bal - jobb
<b>Szín</b>	fekete
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lábszártörés (2-6 heted magasságban)</li> <li>- septicus törés</li> <li>- osteosynthesis után, a bokaizület részleges tehermentesítésére</li> </ul>
<b>Rövid leírás</b>	<p>Bokatehermentesítő eszköz, thermoplasztikus műanyagból, neopréne béléssel. A készülék sínvázalattal erősített, elől bandázsokkal rögzíthető tok, a sínek csuklóval kapcsolódnak a járótalp részhez. A tok a lábfejtől a térdkalács inig tart. A sínezet 10 fokos emelkedéssel állítható. Lábszártörés (2-6 heted magasságban), septicus törés, osteosynthesis utáni kezelő eszköz.</p>



<b>Megnevezés</b>	<b>Járótalp gipszre</b>
<b>Méret</b>	kicsi (35-38) - nagy (39-43)
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	fekete
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	A járógipsz viselése esetén

**Rövid leírás** A járógipsz csúszásmentes talppal való kiegészítése. Rugalmas pántokkal és tépőzárakkal illeszthető a gipszre. A járás biztonságosabb és kényelmesebb.



<b>Megnevezés</b>	<b>AJ - 4 Ventilációs rugalmas térdrögzítő gumi</b>
<b>Méret</b>	<b>S 30-34 cm ; M 34-38 cm ; L 38-42 cm ; XL 42-46 cm ; XXL 46-50 cm</b>
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	kék
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- térdízületi instabilitás - porckopás - laza térdszalagok - sportsérülések - térdkalácsficam
<b>Rövid leírás</b>	Rugalmas textíliából készülő térdgumi. Segítségével védhetjük a térd izomzatait mozgás közben is. A gumírozott felépítésből adódóan nem szükséges külön rögzíteni a terméket a testrészen.



<b>Megnevezés</b>	<b>AJ - 7 Patella szalag</b>
<b>Méret</b>	egy méret
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	fekete
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- patella ín gyulladás - porckopás - patella ín sérülés
<b>Rövid leírás</b>	A Patella pánt viselése elsősorban porckopás, patella ín gyulladás, patella ín sérülés vagy térdkalács károsodáskor javasolt.



<b>Megnevezés</b>	<b>AJ - 422 Gumiszövetes térdrögzítő, szabályozható ízülettel</b>
<b>Méret</b>	1 - 2 - 3
<b>Oldal</b>	bal-jobb
<b>Szín</b>	fekete-kék
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- térdízületi műtét után postoperatív ellátásra (6 hétnél hosszabb ideig tartó) - térdkalácsficam,gyulladás,szalagsérülés,porckopás
<b>Rövid leírás</b>	Korlátozható mozgástartományú térdrögzítő, a comb és lábszár részek megerősített műanyagból készülnek. neoprén béléssel, fokként szabályozható térdízülettel. Ez az eszköz kifejezetten térdműtét után, térdgyulladás, törés, szalagszakadás utáni kezelésre való, amikor a térdízület hajlítási-nyújtási mértéke korlátozott és/vagy 6 hetet meghaladó rehabilitációra van szükség.



## Alsó végtag ortézisek

<b>Megnevezés</b>	<b>AJ - 452 Térdrögztítő oldalsínnel</b>
<b>Méreték</b>	S - M - L - XL - XXL + egyedi méretre is
<b>Oldal</b>	bal-jobb
<b>Szín</b>	kék-fekete
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- kisméretű térdízületi lazaság (pl.menisectomia után,keresztzalag megnyúlás) esetén - traumás eredetű térdkalácsficam - oldalirányú instabilitás - térdízületi instabilitás
<b>Rövid leírás</b>	Puha szövetből, neopréne béléssel készülő térdrögztítő, tépőzáras kivitelben. Általános, hétköznapi enyhébb és közepesen súlyos térd sérülések, gyulladások, instabilitás esetén alkalmazható.



<b>Megnevezés</b>	<b>AJ - 40 Térdrögztítő kétfengelyes térdízülettel, oldalerősítéssel</b>
<b>Méreték</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>Oldal</b>	bal-jobb
<b>Szín</b>	kék-fehér
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- térdízületi instabilitás - traumás térdkalácsficam után, leginkább oldalirányú instabilitás esetén
<b>Rövid leírás</b>	Rugalmas szövetből készülő térdrögztítő , amely a comb- és lábszár részekén gumírozással van ellátva, a tokot beépített izületes sínváz merevíti. A comb részen bandázs segítségével rögzíthető. Térdkalácsficam, térdízületi instabilitás esetén javallott, megakadályozza a térd oldalirányba történő elmozdulását.



<b>Megnevezés</b>	<b>J-71/M csípőrögztítő</b>
<b>Méreték</b>	S-M-L-XL
<b>Oldal</b>	bal - jobb
<b>Szín</b>	fehér-kék
<b>Me.egység</b>	db
<b>Indikáció</b>	- csípőízületi gyulladás esetén - csípőízületi endoprotézis beültetés esetén a műtési eredmény biztosítására - csípőízületi luxatio megakadályozására
<b>Rövid leírás</b>	S (40-45 cm ; 60-75 cm) M (45-52 cm ; 75-90 cm) L (52-60 cm ; 90-105 cm) XL (60-70 cm ; 105-120 cm) 2 db mérési pont



<b>Megnevezés</b>	<b>AJ-421 Tédrögztő szabályozható ízülettel</b>
<b>Méret</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>Oldal</b>	bal-jobb
<b>Szín</b>	kék-fekete
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kisméretű térdízületi lazaság (pl.menisectomia után,keresztzalag megnyúlás) esetén</li> <li>- traumás eredetű térdkalácsficam</li> <li>- oldalirányú instabilitás</li> <li>- térdízületi instabilitás</li> </ul>
<b>Rövid leírás</b>	<p>A lábszár alsó harmadától a comb felső harmadáig érő, sínvázal erősített, szabályozott pályájú térdmozgást biztosító tédrögztő. A hajlítási-nyújtási szöveget a szakorvos határozza meg. Ez a rész gumi fedővel takart.</p>



<b>Megnevezés</b>	<b>J-42/M tédrögztő szabályozható ízülettel</b>
<b>Méret</b>	S - M - L - XL
<b>Oldal</b>	bal- jobb
<b>Szín</b>	fekete
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kisméretű térdízületi lazaság (pl.menisectomia után,keresztzalag megnyúlás) esetén</li> <li>- traumás eredetű térdkalácsficam</li> <li>- oldalirányú instabilitás</li> <li>- térdízületi instabilitás</li> </ul>
<b>Rövid leírás</b>	<p>Műanyag szerkezetű tédrögztő szabályozható ízülettel.Szerkezetének köszönhetően a térdkalács szabadon van, jobban szellőzik. Bélésanyag puha textil, a lábra rögzítést tépőzár oldja meg.A térd mozgástartomány korlátait a szakorvos határozza meg, mely a gyógyulást követően enyhíthető.Erős váza és sínezete nagyfokú stabilitást ad térdízületének.</p>



<b>Megnevezés</b>	<b>L-220 Térdízületi kontraktúra kezelő</b>
<b>Méret</b>	egyedi méretre
<b>Oldal</b>	bal- jobb
<b>Szín</b>	fehér
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	Lábszár amputációt követően a térdízületi kontraktúra megelőzésére.
<b>Rövid leírás</b>	<p>Patellagyűrűvel készített könnyű vázas ortézis kontraktúra elkerülése érdekében. A rugalmas bandázsokat tépőzárral lehet rögzíteni a csonkon.</p>






# Ágyék - keresztcsonti ortézisek

<b>Megnevezés</b>	<b>AF - 20 Rugalmas gerincfűző egyenestartó hevederrel</b>
<b>Méret</b>	70 - 120 cm-ig (5 cm-es lépésekkel)
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	fehér/bézs
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- a háti és ágyéki gerinc rögzítése, megtámasztása, nagyobb fokú mozgás biztosítása mellett - háti-ágyéki spondylosis, discopathiák, tartási hibák korrekciója idősebb korban, valamint a gerinc degeneratív elváltozásai esetén
<b>Rövid leírás</b>	Elastikus anyagból készülő törzsfűző, egyenestartóval, mely a vállakon halad át. Elöl a has két oldalán tépőzárral rögzíthető. A deréktájékot X alakban merevítő erősítik, a gerinc mellett a háti csigolyákig felnyúló rugalmas síneket a háti szakaszt támasztják meg.



<b>Megnevezés</b>	<b>F - 17 Medenceszorító öv</b>
<b>Méret</b>	70-130 cm-ig (5 cm-es lépésekkel)
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	fehér
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- lumbago - postdiscectomyas syndroma - spondylosis - spondylarthrosis - spondylolisthesis - fractura ossis pubis sine dislocatione
<b>Rövid leírás</b>	Tépőzáras medenceszorító öv, rugalmas masszírozós ágyéki pelotával, amely tetszőlegesen kivethető. A medenceszorító öv hétköznapi használatra javasolt derékfájdalmak, nehéz fizikai munkavégzéshez..

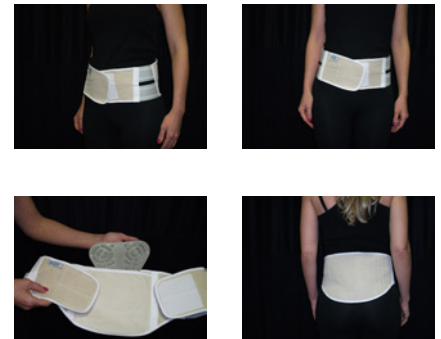

<b>Megnevezés</b>	<b>AF - 110 Emlékeztető heveder</b>
<b>Méret</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	fehér
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- dorsalis és lumbalis gerincszakasz nyílrányú tartási hibái esetén - gyermekeknél a laza ízületi rendszer és/vagy tónustalan izomzat következtében létrejött rossz testtartás
<b>Rövid leírás</b>	A bandázs erős, rugalmas vászonból készül, a két vállgyűrűn keresztül átűjtve viselhető, Tépőzárral szabályozható feszessége, de viselése mellett elengedhetetlen a rendszeres gyógytorna.



**Megnevezés AV - 66 Brooks gyűrű**

**Méreték** 1- 2 -3- 4- 5- 5.5- 6- 7-es méretek / XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

XS (4 - 4,5 cm) S (4,5 - 5 cm) M (5 - 5,5 cm) L (5,5 - 6 cm)  
XL (6 - 6,5 cm) XXL (6,5 - 7 cm) XXXL (7-8 cm)


**Oldal** -

**Szín** bézs

**Me.egység** darab

**Indikáció** - ujjhegy, körömágy sérülés esetén  
- a feszítő ín szakadás, sérülése esetén

**Rövid leírás** Kicsi, bőrbarát thermoplasztikus műanyag ujjrögzítő, tépőzárral. A rögzítő sín az ujjat kinyújtott állapotban tartja.

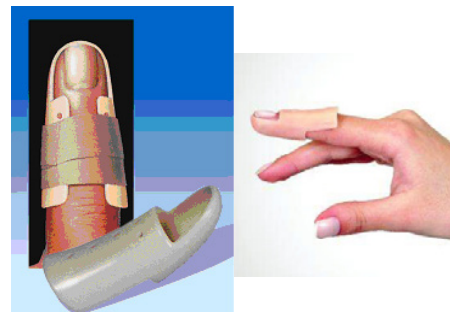

**Megnevezés AV - 3 Ventilációs rugalmas csuklórögzítő**

**Méreték** S - M - L - XL

**Oldal** bal-jobb

**Szín** kék

**Me.egység** darab

**Indikáció** - ízületi gyulladás  
- ízületi instabilitás  
- traumás eredetű sérülések utáni rehabilitációra

**Rövid leírás** Gumírozott, légáteresztő szövetből készült csuklórögzítő gumi. Az ujjak szabadon mozoghatnak, kényelmes viselet jellemzi. Enyhébb rándulások, ficamok, törések utáni fájdalommentes rögzítésre használható.



**Megnevezés AV - 21 Tenyértámasztó, gumiszövetes, fémmerevítéssel**

**Méreték** S - M - L - XL - XXL

**Oldal** bal-jobb

**Szín** kék-fehér

**Me.egység** darab

**Indikáció** - distorzió  
- subluxatio  
- luxatio  
- arthritis  
- tendovaginitis

**Rövid leírás** Gumiszövetes anyagból készülő, két oldalt fémsín merevítéses tenyértámasztó segédeszköz. Tépjőzárral rögzíthető. Fő feladata a csukló és kézfej rögzítése, nyugalmi helyzetet biztosít a kéznek



## Felső végtag és nyaki ortézisek

<b>Megnevezés</b>	<b>V - 31/M Alkarközépig érő csuklórögztő</b>
<b>Méreték</b>	S - M - L - XL
<b>Oldal</b>	bal-jobb
<b>Szín</b>	kék-fehér
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rheumatoid arthritis</li> <li>- N. radialis paresis</li> <li>- izomeredetű bénulások</li> <li>- központi idegrendszeri eredetű bénulás</li> <li>- fájdalmas csuklózületi mozgások kiiktatása</li> </ul>
<b>Rövid leírás</b>	Gumiszövetes, tépőzáras hosszú csuklórögztő, beépített merevítéssel. Elsősorban a kéz, csukló és alkar betegségeinek kezelésére és a gyógyulás elősegítésére szolgál.



<b>Megnevezés</b>	<b>AV - 117 (2 ágú), AV - 118 (4 ágú), AV - 119 (1 ágú) Hab bélésű ujjrögztők</b>
<b>Méreték</b>	egy méret
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	szürke-kék
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ujjak flexiós kontraktúrája esetén</li> <li>- ín sérülések</li> <li>- traumás eredetű sérüléseknél</li> </ul>
<b>Rövid leírás</b>	Kicsi, pehelykönnyű alumínium ujj sínezetek, puha habbal bélelve. Számos, ujjat ért traumás sérülések, gyulladások, inszakadások esetén fixen tartja az ujjakat, megakadályozza azok hajlítását, elmozdítását.



<b>Megnevezés</b>	<b>Méretre vágható hab bélésű ujjrögztő sín</b>
<b>Méreték</b>	egyedi méret
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	-
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ujjak flexiós kontraktúrája esetén</li> <li>- ín sérülések</li> <li>- traumás eredetű sérüléseknél</li> </ul>
<b>Rövid leírás</b>	Egyedileg méretre vágható alumínium egyenes sín, habszivacs bélelssel. A helyszínen tetszőlegesen vágható és formázható az ujjra. Célja ugyanaz, mint az AV-117/118/119-es termékeknek.



Megnevezés	AV - 46 Gumiszövetes könyökrögzítő, fémsínnel							
Méretek	S		M		L		XL	
	f	d	f	d	f	d	f	d
	19-22	21-24	22-24	24-26	24-26	26-28	26-28	28-30
<b>Oldal</b>	bal-jobb							
<b>Szín</b>	kék							
<b>Me.egység</b>	darab							
<b>Indikáció</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- postoperatív kezelésre</li> <li>- arthrosis</li> <li>- arthritis esetén</li> </ul>							
<b>Rövid leírás</b>	Sínvázzal erősített, rugalmas könyökrögzítő az epicondilitis krónikus gyulladására vagy fájdalmas izommozgások (sportolásnál tenisz) esetére. A könyökrögzítő az alkar felső harmadától az alkar alsó harmadáig ér, tépőzárral tudjuk rögzíteni.							



Megnevezés	AV - 441 Sínvázas könyök ortézis			
Méretek	S	M	L	XL
		19-24	24-26	26-28
<b>Oldal</b>	bal-jobb			
<b>Szín</b>	kék			
<b>Me.egység</b>	darab			
<b>Indikáció</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- epicondilitis krónikus gyulladására</li> <li>- fájdalmas izommozgások (pl.: teniszezés, sporttevékenységek) esetén használható</li> </ul>			
<b>Rövid leírás</b>	A könyökrögzítő rugalmas légáteresztő anyagból készül, beépített merevítő sínezettel. A könyökizületet magába foglaló tok felnyúlik az alkar alsó harmadába illetve a felkar felső harmadáig, a tokban két epicondylus pelotta van rögzítve tépőzárral, amelyek segítségével azok beállíthatók a megfelelő helyre. Az alkaron tépőzárral rögzíthetjük.			



Megnevezés	AV - 4 Ventilációs könyökrögzítő gumi				
Méretek	S	M	L	XL	XXL
		20-23 cm	23-26 cm	26-29 cm	29-32 cm
<b>Oldal</b>	-				
<b>Szín</b>	kék				
<b>Me.egység</b>	darab				
<b>Indikáció</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rándulások, ficamok, izomhúzódás esetén</li> <li>- törések utáni rehabilitációra</li> </ul>				
<b>Rövid leírás</b>	Rugalmas szövetből készült könyökrögzítő, mely könyöksérülések, műtétek utáni konzervatív kezelésre használható. Az anyag légáteresztésének köszönhetően izzadás nem fordul elő.				



## Felső végtag és nyaki ortézisek

<b>Megnevezés</b>	<b>AV-47 Kontraktúra kezelő könyökrögzítő szabályozható ízülettel</b>
<b>Méret</b>	S (22-25 cm) M (26-29 cm) L (30-33 cm)
<b>Oldal</b>	jobb-bal
<b>Szín</b>	fehér-kék
<b>Me.egység</b>	db
<b>Indikáció</b>	- kontraktúras könyök rehabilitációjára - a könyök ínszalagjainak műtét utáni rehabilitációjára - könyöktörés, dislocatio miatti rögzítésre
<b>Rövid leírás</b>	Szabályozható mozgásterjedelmű ízülettel készült thermoplasztikus könyökortézis kontraktúras könyök stabilizálására, rehabilitációjára. A rögzítő belseje frottírral bélelt, a kényelmesebb viseletért vállszalaggal rögzíthető. Állítható flexiós-extenziós mérték. A szalag megakadályozza a csukló leesését.



<b>Megnevezés</b>	<b>AV - 560 Vászongartató</b>
<b>Méret</b>	egy méret
<b>Oldal</b>	
<b>Szín</b>	szürke
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- kartörés után gipsz helyett - gyulladások, traumás sérülések után - luxatio humeroscapularis, luxatio acromioclavicularis - contusio omii, humerus diaphysis közepső 3/5-ének törései
<b>Rövid leírás</b>	Vászonból, gipszelés helyett vagy gipszelés után használható kartartó., melynek célja a sérült kar rögzítése, stabilizálása, nyugalomban tartása. A vállon átfelülő heveder tetszőlegesen beállítható.



<b>Megnevezés</b>	<b>AV - 561 Vászongartató</b>
<b>Méret</b>	1 - 2 - 3
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	kék
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- kartörés után gipsz helyett - gyulladások, traumás sérülések után - műtétet követően
<b>Rövid leírás</b>	Neoprén anyagból készülő kartartó heveder, műtét utáni időszakokra, törésekre, gipszelés helyett. Fő feladata a sérült vagy beteg kar egy helyben rögzítése, stabilizálása a legkényelmesebb módon. Használatával a kar szellőzik, az izzadás és az ebből eredő bőrirritáció, viszketés elkerülhető. A pántokkal a terhelés elosztását és a magasságot tudjuk szabályozni.





## Kartartók

<b>Megnevezés</b>	<b>AV - 562 Kétrészes vállrögzítő</b>
<b>Méret</b>	1 ; 2
<b>Oldal</b>	
<b>Szín</b>	fekete
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- váll vagy felkar traumás sérülése, gyulladása esetén - váll, felkar műtétet követően rögzítésre
<b>Rövid leírás</b>	Rugalmas anyagból készül, a derékövön elhelyezett alkartokban rögzíthetjük a felkart. Vállpántok segítségével a terhelést tudjuk elosztani. A vállrögzítővel teljes rögzítést tudunk elérni.




<b>Megnevezés</b>	<b>F - 76 Schanz gallér</b>
<b>Méret</b>	I.-II.-III.-IV.-V.
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	fehér
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- spondylosis, discopathia, spondylarthrosis a nyaki szakaszon - torticollis, csigolya tumor, nyaki distorsio - idegi fájdalmak, egyszerű stabil törések, luxáció
<b>Rövid leírás</b>	A nyaki gerinc betegségeinél a nyak megtartására és ezáltal a tünetek csökkentésére szolgáló ortézis. Óvja a gerinc nyaki szakaszát a fájdalommal járó mozgásoktól, valamint jó hőszigetelő tulajdonsága miatt a nyakat melegen tartja. A nyakrögzítő váza habszivacs, mely textillal borított, a nyak hátsó részén tépőzárral rögzíthető.



<b>Megnevezés</b>	<b>E-65 Koponyavédő</b>
<b>Méret</b>	egyedi méretre
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	fehér
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- a fej részleges vagy teljes traumás sérülése - agyvérzéses , esetleg hemipleg állapot - postoperatív ellátásra
<b>Rövid leírás</b>	Műanyagból készült koponyavédő, mely az emberi fejre kerül felhelyezésre. Traumás sérülések ellátására készült, hogy védje a sérült vagy operált koponyát vagy bőrfelületet. Óvja a fertőzésektől, sérülésektől, és biztosítja az egyenletes bőr és seb gyógyulást.



# Hasi és lágyéksérvkötők

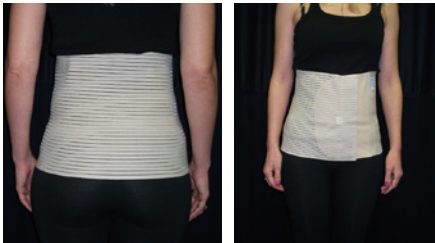

<b>Megnevezés</b>	<b>AH - 10 Haskötő</b>
<b>Méreték</b>	70 - 130 cm-ig (5 cm-es lépésekkel) / 16 vagy 26 cm-es magassággal
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	bézs
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- hasfali sérv - operált hasfali sérv - köldök sérv - műtét helyett

**Rövid leírás** Hasi sérvkötő, mely a has kóros alakváltozásait és a belső zsigeri szervek süllyedését korrigálja. A haskötő vászomból készült oldalt gumiszövet betéttel. Záródás fűzéssel ill. tépőzárral történik.



<b>Megnevezés</b>	<b>AH - 121 Normál Adaptálható haskötő hasemelővel</b>
<b>Méreték</b>	70 - 130 cm-ig (5 cm-es lépésekkel)
<b>Oldal</b>	-
<b>Szín</b>	bézs
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- hasfali sérv - operált hasfali sérv - köldök sérv - műtét helyett

**Rövid leírás** Erős vászomból, vászonbéléssel készült tépőzáras, ill. fűzős záródással haskötő. Viselete ajánlott hasfali műtétek után, hasfali sérv esetén vagy ha a műtét nem javasolt.



<b>Megnevezés</b>	<b>AH - 42 Egyoldali lágyéksérvkötő</b>
<b>Méreték</b>	80 - 120 cm-ig (5 cm-es lépésekkel)
<b>Oldal</b>	bal-jobb
<b>Szín</b>	bézs
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- lágyéksérv

**Rövid leírás** A lágyéksérvkötő a test vonalát követő rugalmas derékövből és a sérv helyzetét megfelelő szögbe tartó fémpelottából áll, amelyre bőrbevonatú nyomópárna van felerősítve. A derékövhöz a sérvpelottát combszalag szíjjal lehet rögzíteni.



<b>Megnevezés</b>	<b>AH - 52 Kétoldali lágyéksérvkötő</b>
<b>Méreték</b>	80 - 120 cm-ig (5 cm-es lépésekkel)
<b>Oldal</b>	kétoldali
<b>Szín</b>	bézs
<b>Me.egység</b>	darab
<b>Indikáció</b>	- lágyéksérv

**Rövid leírás** A lágyéksérvkötő a test vonalát követő rugalmas derékövből és a sérv helyzetét megfelelő szögbe tartó fémpelottából áll, amelyre bőrbevonatú nyomópárna van felerősítve. A derékövhöz a sérvpelottát combszalag szíjjal lehet rögzíteni.



## Megrendelés/Információ

A katalógusban található termékeket megvásárolhatja személyesen szaküzletünkben. Az aktuális árakról kérjük, érdeklődjön.

### Szaküzleteink:

#### **Pillangó Egészségcentrum**

1149 Budapest Pillangó u.12.

Tel: (06-1) - 330 - 7735; (06-1) - 288 - 6640

Fax: (06-1) - 700 - 2149;

Nyitva tartás hétköznap 8.00 - 16.00

**Bankkártyás fizetési lehetőség.**

**Viszonteladói értékesítés a 1101 Budapest, Fehér út 10. /51. épületben**

Az aktuális árakról kérjük, érdeklődjön.

A katalógusban szereplő termékek megvásárolhatók, megrendelhetők:



GYSGY REHA KFT.

1149 Budapest, Pillangó u.12.

Tel: +36 1 330 - 7735

Viszonteladói kiszolgálás

1101 Budapest, Fehér út 10. / 51.ép.

Tel: +36 1 288 6640 ;

E-mail: [megrendeles@gysgy.hu](mailto:megrendeles@gysgy.hu)

Az esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem vállalunk!

Készítette: Kozma Viktor

Frissítve: 2022-10-01